


NEED MORE IMPRESSION PUTTY? ORDER AT:


<https://www.dldsmiles.com/product-category/accessories>



GOOD Notice the well defined teeth, no blurry area.

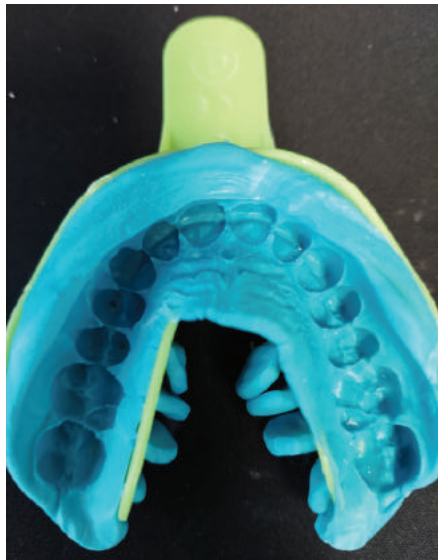


BAD Putty was not mixed well
Teeth are not clear.
Solution - Mix well with your fingertips.

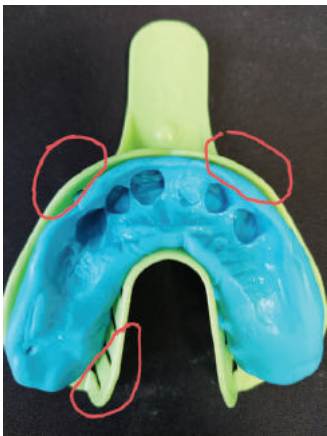

BAD Putty moved away from tray.
Solution - Slightly push putty into tray before insertion.



BAD Teeth were not pushed down enough.
Solution - Push putty harder into your teeth.

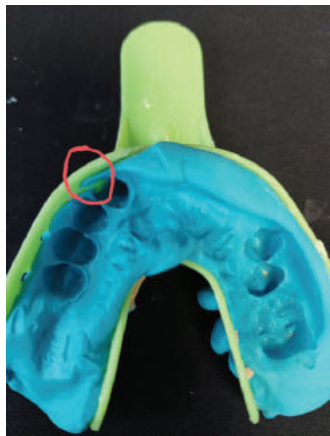

BAD Teeth are touching tray.
Solution - Make sure to align tray to your mouth or use a larger tray.




TEETH IMPRESSION GUIDE





Included with your kit will be a set of two (2) lower arch (figure A.) and two (2) upper arch (figure B.) trays in two different sizes. Before starting choose the size that best fits your mouth, The tray should be large enough so the sides of the tray do not touch the front or back areas of your teeth. Also included are 2 sets of impression putty. Lastly included is a wax bite wafer. Before mixing the two different colored putty's together be sure they are at room temperature.

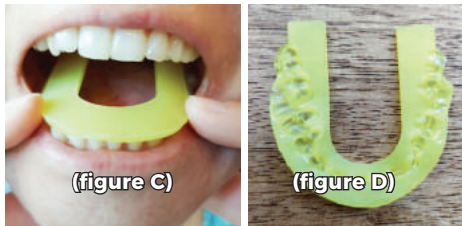

STEP 1

It's time to take your wax bite. Insert the wax bite wafer onto your lower teeth and bite down in your natural manner (figure C). When taking out the wax wafer you should see teeth marks on both sides of the wafer (figure D). Do not bend or fold the wax wafer.



STEP 2

Begin to mix the first set of different colored putty vigorously together with your fingertips. Make sure to blend them until a solid color forms. Use all the putty included when mixing.

THIS STEP MUST TAKE LESS THAT 30 SECONDS.



STEP 3

After putty is blended, roll it into a cylindrical shape about 4 inches long with your palms and place it into the tray.

THIS STEP MUST TAKE LESS THAT 30 SECONDS.



STEP 4

Once in the tray, lightly push down on the putty for better coverage.

THIS STEP MUST TAKE LESS THAT 30 SECONDS.



STEP 5

Now it's time to place the tray into your mouth. When inserting the tray make sure your teeth are **NOT** touching any borders of the tray. Use strong and even force until all your teeth and gums are deeply submerged into the putty. While the putty is hardening keep your thumbs on the bottom of the tray for support.

DO NOT move the tray while the putty is hardening, as this can lead to a poor fitting appliance. **KEEP THE TRAY IN YOUR MOUTH FOR 2:00 MINUTES UNTIL FULLY SET.** When finished leave the material in the tray, **DO NOT** pull impression out of the tray.

STEP 6

REPEAT IMPRESSION TAKING PROCESS WITH YOUR OPPOSITE ARCH. PLEASE MAKE BOTH UPPER AND LOWER IMPRESSIONS UNLESS NOTED OTHERWISE.

STEP 7

When you're finished taking the wax bite and impressions it's time to send them to Dental Lab Direct. Rinse the items under room temperature tap water and place the items in the plastic bag. Fill out the order form and place the pre-paid USPS shipping label on the outside of the box. Seal the box up with the included DLD sticker and drop it off at your nearest mailbox or USPS post office.



QUICK TIPS

- Using a timer is highly recommended. Remember the putty begins to harden after 1.5 minutes (90 seconds), so make sure to insert the tray into your mouth before 1.5 minutes (90 seconds). You can always order more putty in our products page at <https://www.dldsmiles.com/product-category/accessories>
- After taking impressions make sure to send them out immediately.
- On the arch you are making a new appliance for, make sure to remove any dental appliances before taking your impression. On the opposite arch keep your dental appliance in your mouth while taking your impression.
- If you're still not sure how your impression turned out, you can always snap a photo of the impression with your smartphone and send it to info@dldsmiles.com
- As long as you follow the instructional steps, your impression will turn out great. The whole process should not take more than 15 minutes. We're here for you every step of the way so if you have any questions send us an e-mail or give us a call at **888-591-2220**

2. Casi está terminado

Los próximos 3 minutos son la parte relajante. Una vez que la masilla esté completamente mezclada y en la bandeja, es posible que desee usar un espejo para poder alinear la bandeja correctamente en su boca antes de empujar la masilla en sus dientes.

Con los pulgares, aplique una fuerza suave pero constante hasta que las puntas de los dientes toquen la bandeja. Mantenga la bandeja en esa posición durante 3 minutos para que la masilla se endurezca. No hable, no se mueva ni mueva la bandeja, ya que esto puede causar una impresión inexacta. Quédese lo más quieto posible con los pulgares y los dedos sosteniendo la bandeja todo el tiempo.



ENVIARLOS POR CORREO

¡Lo hiciste! Una vez transcurridos los 3 minutos, es el momento de sacar sus impresiones. No retire la masilla de las bandejas, simplemente enjuáguelas con agua a temperatura ambiente, séquelas y colóquelas en una bolsa plástica incluida.

No olvide llenar el formulario de pedido e incluirlo en la caja.

Una vez que se adjuntan las 2 impresiones y el formulario de pedido, coloque la etiqueta prepaga de USPS incluida en la parte superior de la caja y use la etiqueta DLD incluida para sellar la caja. Por último, simplemente coloque la casilla en cualquier buzón de correo de USPS o vaya a su oficina postal local. Puede esperar su electrodoméstico en solo un par de semanas o menos.



¿PREGUNTAS? CONTACTANOS!

O visita nuestra pagina web
para ver videos explicativos

888-591-2220
info@DentalLab-Direct.com

DentalLab-Direct.com

Dental Lab Direct



GUIA DE IMPRESION



ANTES DE QUE EMPIECES:

Siga nuestra sencilla guía para tomar impresiones y estará en camino de hacer impresiones perfectas. Recomendamos dejar reposar las masillas durante 1 hora a temperatura ambiente antes de su uso.



Bandejas

Se incluyen 2 juegos de 3 tamaños diferentes de bandejas. Compruebe el mejor tamaño para su boca colocándolo en su boca. Si se siente demasiado ajustado o no cubre los 2 molares posteriores, pruebe con un tamaño diferente. No se preocupe por la bandeja cubriendo su 3er molar (muelas del juicio)



Masilla

Usted recibió 2 juegos de masillas de diferentes colores. Uno para el arco superior y otro para el inferior. Asegúrese de dejarlos afuera para que alcancen la temperatura ambiente.

Por favor tenga en cuenta la siguiente exención de responsabilidad: El uso de materiales de impresión puede causar una reacción alérgica o pérdida o daño a la estructura del diente. Los materiales de impresión presentan un riesgo potencial de asfixia por aspiración o ingestión de material.



Cepillo e hilo dental

Asegúrese de que sus dientes están recién lavados y con hilo dental.




Manos limpias

Lávese y séquese las manos antes de manipular la masilla.



Temporizador

Prepare un temporizador para mantener sus impresiones a tiempo.

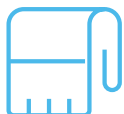

Toalla

No es bonito, pero puedes babear cuando saques tus impresiones.

HAGÁMOSLO

Usted hará un total de (2) impresiones. 1 para su arco superior y 1 para su arco inferior. Cada uno debería tardar entre 4 y 5 minutos en completarse.

1.Mezclar y moldear

Para hacer el molde, mezcle las dos masillas de diferentes colores hasta que se convierta en un color sólido. Una vez que comience a mezclar, debe trabajar rápidamente, luego coloque inmediatamente el molde en su boca. Asegúrese de quitarse cualquier aparato de la boca antes de tomar la impresión, pero solo para el arco para el que va a hacer el nuevo aparato.

A

en 30 segundos



Mezcla: Puede ser tentador enrollar masillas, pero no lo haga.

La forma correcta de mezclar es doblarlos una y otra vez de nuevo con las yemas de los dedos.

B

en 15 segundos



Rollo: Una vez que la masilla está mezclada, enrolla la masilla entre sus manos para crear una forma de salchicha de aproximadamente 4 pulgadas de largo

C

en 15 segundos



Coloque el rollo de masilla en la bandeja (hasta el fondo). No aplique mucha fuerza y empuje la masilla hacia la bandeja.